

# 前鼻孔ぬぐい液検査の方法(新型コロナウイルス検査前鼻孔ぬぐい液採取法\_患者説明 2023/11/30)


(注意:患者さんへ渡す容器には**外来は汎用ラベル**,**病棟はオーダーラベル**を貼って渡す)

## 1. 手を洗う



## 2. 綿棒を取り出す

先端を触らない

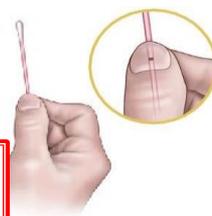

鼻の中をほじるように  
ただし、奥までは入れない

2.5cm以上  
挿入しない!

## 3. 小鼻の内側をぬぐう

鼻の内側にあてながら  
3回転させる  
他方の鼻にも挿入し  
3回転させる



## 4. 綿棒を容器へ入れて提出



フタをとる




赤いブレイクポイントをチューブの最  
上部に合わせ折る



フタを閉めて提出

**冷暗所保存**

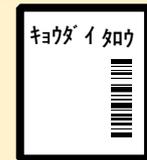

病棟: **オーダーラベル**  
外来: **汎用ラベル**