



# 現行(JSCC)法と新(IFCC)法の相関 【ALP】

X : 現行(JSCC)法試薬	Y : 新(IFCC)法試薬
装置名 : LAbOSPECT008	装置名 : LAbOSPECT008
メーカー名 : 富士フイルム和光純薬	メーカー名 : 富士フイルム和光純薬

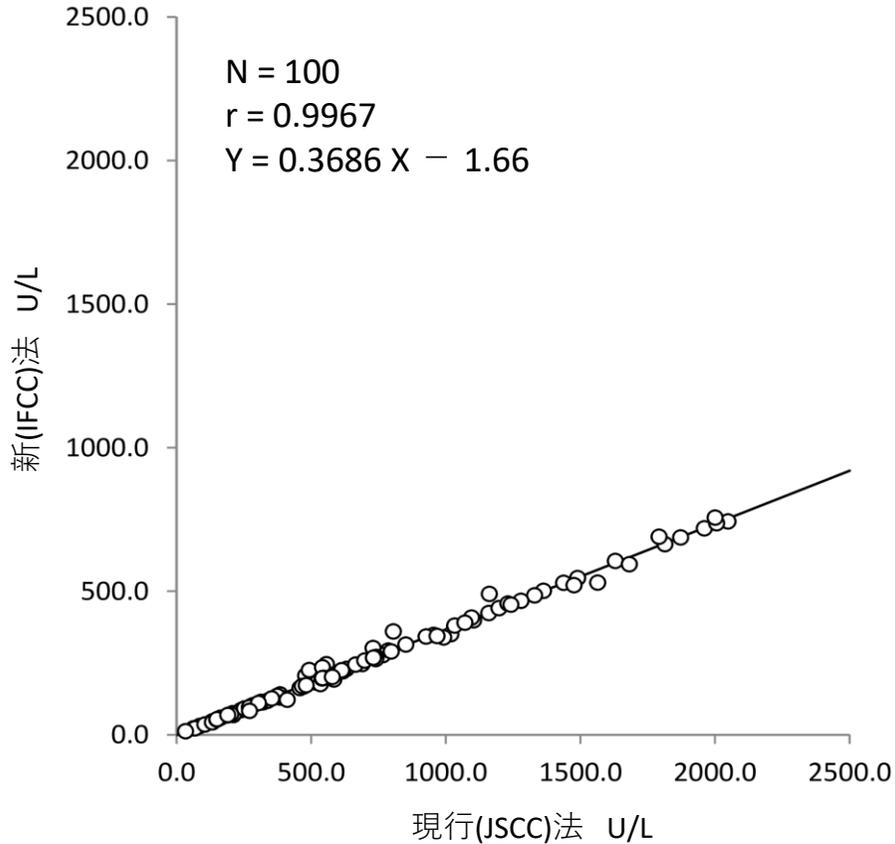

測定値は約1/3になります。  
二法の相関は良好です。

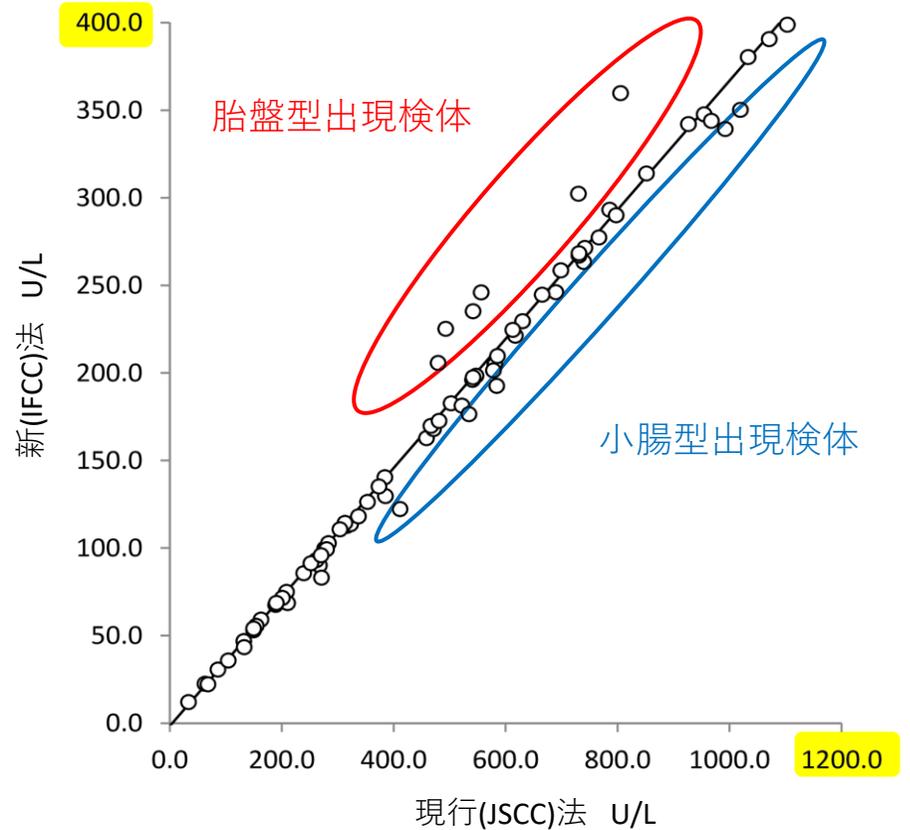

測定値の挙動は、アイソザイムにより異なります  
(小腸型:低値傾向、胎盤型:高値傾向)。