

[0205000/2A-990-025]

Ver.14

2.血液学的検査 >> 2A.血液一般・形態検査>>2A990 血小板数

血小板数

platelet count

連絡先 平日時間内：3482

時間外・休日：3479・PHS 2908

患者同意について

検査結果に影響を与える臨床情報

RBC fragmentを有する患者検体では、血小板数を偽高値とする可能性があります。cryoglobulin, cryofibrinogenは血小板数を偽高値とする可能性があります。EDTA依存性血小板減少を呈する患者検体では、血小板数が偽低値となる可能性があります。

オーダーボタン名(検体)

検査予約

至急オーダー

可

検査オーダーに関する注意事項

患者の検査前準備

検体採取のタイミング

ラベル見本(検体)(単項目オーダー時)

ラベル見本(細菌)(単項目オーダー時)

採取容器・検査材料

01

A

EDTA-2K(薄紫)

採取材料

血液


採取量

2 mL

測定材料

全血

測定必要量

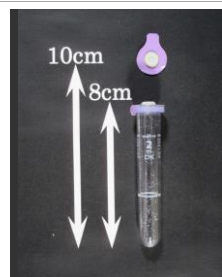

採取容器について

検体採取について

EDTA以外は不可
検体凝固で偽低値の可能性

採取後検体の取扱い

[0205000/2A-990-025]

Ver.14

2.血液学的検査 >> 2A.血液一般・形態検査>>2A990 血小板数

血小板数

platelet count

連絡先 平日時間内：3482

時間外・休日：3479・PHS 2908

室温保存

検体搬送について

採取後ただちに搬送

採取検体の保存条件

	保存検体種	優先 保存条件	保存条件1		保存条件2		保存条件3	
			温度	安定性	温度	安定性	温度	安定性
01	翌日保存不可	保存条件1	保存不可					

受入不可基準

溶血	検体凝固	強乳び	採取量過不足	採取容器違い
	不可			不可
尿材料違い	冷蔵保存なし	遮光保存なし	開栓	黄疸

検査に要する時間(生理検査)

再検査・追加検査の対応可能日数

検体採取から6時間

検体採取に関する注意事項・検査の実施に関する注意事項

検査機器	平日時間内：XR-9000（シスメックス） / 休日・時間外：XN-1000（シスメックス） / ICU：XN-330（シスメックス）
------	--

検査所要日数 当日報告

検査部門・委託先

検査部門(平日時間内) 中央診療棟2階 中央検査室

検査部門(時間外・休日) 中央診療棟2階 時間外検査室

検査結果報告について

基準値設定材料・検査方法

基準値設定材料	血液
検査方法	シースフローDC検出法, フローサイトメトリー法

[0205000/2A-990-025]

Ver.14

2.血液学的検査 >> 2A.血液一般・形態検査>>2A990 血小板数

血小板数

platelet count

連絡先 平日時間内：3482

時間外・休日：3479・PHS 2908

生物学的基準範囲

		男性	女性	単位
52	白血球数<a href=" ../medical/med0	3.30 - 8.60	3.30 - 8.60	X10*9/L
51	赤血球数<a href=" ../medical/med0	4.35 - 5.55	3.86 - 4.92	X10*12/L
53	ヘモグロビン<a href=" ../medical/	13.7 - 16.8	11.6 - 14.8	g/dL
54	ヘマトクリット<a href=" ../medical	40.7 - 50.1	35.1 - 44.4	%
56	MCV<a href=" ../medical/med0002	83.6 - 98.2	83.6 - 98.2	fL
57	MCH<a href=" ../medical/med000	27.5 - 33.2	27.5 - 33.2	pg
58	MCHC<a href=" ../medical/med00	31.7 - 35.3	31.7 - 35.3	g/dL
55	血小板数<a href=" ../medical/med0	158 - 348	158 - 348	X10*9/L
59	RDW-SD	***	***	fL
60	RDW-CV	***	***	%
00	PDW	***	***	fL
61	MPV	***	***	fL
00	P-LCR	***	***	%

基準値情報

緊急異常値

!L 50,000 / μ L 未満!H 1,500,000 / μ L 超

電話連絡対応

30,000 / μ L 未満

臨床的意義

異常値を示す病態・疾患

[0205000/2A-990-025]

Ver.14

2.血液学的検査 >> 2A.血液一般・形態検査>>2A990 血小板数

血小板数

platelet count

連絡先 平日時間内：3482

時間外・休日：3479・PHS 2908

参考文献

JLAC10

分析物	2A990	末梢血液一般検査
識別	0000	
材料	019	全血（添加物入り）
測定法	309	自動機械法

変更履歴

Ver	文書更新日	変更適用日	内容
1	2008/04/01	2008/04/01～	制定
2	2012/02/01	2012/01/04～	検査機器変更
3	2016/04/25	2016/04/01～	平成28年度診療報酬改定
4	2018/04/06	2018/04/01～	平成30年度診療報酬改定
5	2020/04/02	2020/04/01～	令和2年度診療報酬改定
6	2022/03/09	2021/12/09～	採取名称部分に検体搬送先を印字
7	2022/03/29	2022/01/01～	JCCLS共用基準範囲を採用
8	2022/04/06	2021/06/25～	検査室名称を変更
9	2022/04/07	2022/01/04～	検査機器変更
10	2022/07/08	2022/01/01～	緊急異常値・電話連絡対応基準変更
11	2022/08/01	2022/04/01～	令和4年度診療報酬改定
12	2022/10/21	2022/03/28～	24時間測定可能項目として改訂, 項目コード統合 （[0205000] ← [0205000・em0205000・
13	2022/12/01	2022/12/01～	受入不可基準などについて全面改訂

[0205000/2A-990-025]

Ver.14

2.血液学的検査 >> 2A.血液一般・形態検査>>2A990 血小板数

血小板数

platelet count

連絡先 平日時間内：3482 時間外・休日：3479・PHS 2908

14	2024/06/04	2024/06/01～	令和6年度診療報酬改定
----	------------	-------------	-------------