

[0206690/2A-990-033]

Ver.5

2.血液学的検査 >> 2A.血液一般・形態検査>>2A990 IPF% (幼若血小板比率)

IPF%

(幼若血小板比率)

immature platelet fraction

連絡先 平日時間内：3482

時間外・休日：3479・PHS 2908

患者同意について

検査結果に影響を与える臨床情報

オーダーボタン名(検体)

検査予約 16時30分以降要連絡

至急オーダー 可

検査オーダーに関する注意事項

患者の検査前準備

検体採取のタイミング

ラベル見本(検体)(単項目オーダー時)

ラベル見本(細菌)(単項目オーダー時)

採取容器・検査材料


01 A EDTA-2K(薄紫)

採取材料 血液

採取量 2 mL

測定材料 全血

測定必要量

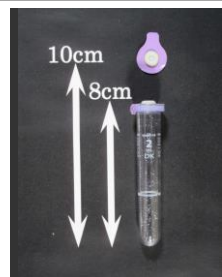

採取容器について

検体採取について

採取後検体の取扱い

室温保存

検体搬送について

採取後ただちに搬送

[0206690/2A-990-033]

Ver.5

2.血液学的検査 >> 2A.血液一般・形態検査>>2A990 IPF% (幼若血小板比率)

IPF%

(幼若血小板比率)

immature platelet fraction

連絡先 平日時間内：3482

時間外・休日：3479・PHS 2908

採取検体の保存条件

	保存検体種	優先 保存条件	保存条件1		保存条件2		保存条件3	
			温度	安定性	温度	安定性	温度	安定性
01	翌日保存不可	保存条件1	保存不可					

受入不可基準

溶血	検体凝固	強乳び	採取量過不足	採取容器違い
尿材料違い	冷蔵保存なし	遮光保存なし	開栓	黄疸

検査に要する時間(生理検査)

再検査・追加検査の対応可能日数

検体採取に関する注意事項・検査の実施に関する注意事項

検査機器	平日時間内：XR-9000（シスメックス） / 休日・時間外：XN-1000（シスメックス）
検査所要日数	当日報告
検査部門・委託先	
検査部門(平日時間内)	中央診療棟2階 中央検査室
検査部門(時間外・休日)	中央診療棟2階 時間外検査室

検査結果報告について

基準値設定材料・検査方法

基準値設定材料	血液
検査方法	フローサイトメトリー法

生物学的基準範囲

		男性	女性	単位
00	IPF%	***	***	%

immature platelet fraction

連絡先 平日時間内：3482

時間外・休日：3479・PHS 2908

基準値情報

緊急異常値

電話連絡対応

臨床的意義

[illegible]

異常値を示す病態・疾患

参考文献

Sugimori, Naomi *et al*. Aberrant increase in the immature platelet fraction in patients wi

JLAC10

分析物	2A990	末梢血液一般検査
識別	0000	
材料	019	全血（添加物入り）
測定法	309	自動機械法

變更履歷

Ver	文書更新日	変更適用日	内容
1	2022/05/02	2022/01/01～	新規作成, 報告開始
2	2022/08/01	2022/04/01～	令和4年度診療報酬改定
3	2022/10/21	2022/03/28～	24時間測定可能項目として改訂

[0206690/2A-990-033]

Ver.5

2.血液学的検査 >> 2A.血液一般・形態検査>>2A990 IPF% (幼若血小板比率)

IPF% (幼若血小板比率)

immature platelet fraction

連絡先 平日時間内：3482

時間外・休日：3479・PHS 2908

4	2022/12/01	2022/12/01～	受入不可基準などについて全面改訂
---	------------	-------------	------------------

5	2024/06/04	2024/06/01～	令和6年度診療報酬改定
---	------------	-------------	-------------