

[0351/5C-070-001]

Ver.17

5.免疫学的検査 >> 5C.血漿蛋白>>5C070 CRP(C反応性蛋白)

CRP(C反応性蛋白)

C-reactive protein

連絡先 平日時間内：3487

時間外・休日：3479・PHS 2908

患者同意について

検査結果に影響を与える臨床情報

オーダーボタン名(検体)

0351 001 CRP

0351 003 CRP

0351 004 CRP[臍帯血]

検査予約

至急オーダー

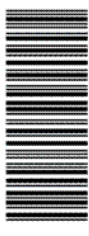
可

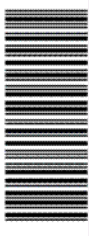
検査オーダーに関する注意事項

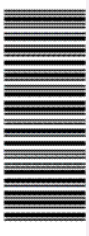
患者の検査前準備

検体採取のタイミング

ラベル見本(検体)(単項目オーダー時)

キョウダ イテスト	
注 80 外	
☐	急
ラ 1.	
血液	*-****-15002
中検	**_***_***
C5	5ml

キョウダ イテスト	
注 80 外	
☐	急
ラ 1.	
血液	*-****-78004
中検	**_***_***
L3	3ml

キョウダ イテスト	
注 80 外	
☐	急
ラ 1.	
臍帯血	*-****-15002
中検	**_***_***
C3	5ml

ラベル見本(細菌)(単項目オーダー時)

採取容器・検査材料

[0351/5C-070-001]

Ver.17

5.免疫学的検査 >> 5C.血漿蛋白>>5C070 CRP(C反応性蛋白)

CRP(C反応性蛋白)

C-reactive protein

連絡先 平日時間内：3487

時間外・休日：3479・PHS 2908

01	C5	高速凝固促進剤＋血清分離剤(オレンジ))	採取材料	血液	採取量	5 mL	
		遠心分離			遠心		
測定材料	血清	測定必要量					
02	C5	高速凝固促進剤＋血清分離剤(オレンジ))	採取材料	臍帯血	採取量	5 mL	
		遠心分離			遠心		
測定材料	臍帯血上清	測定必要量					
03	L3	ヘパリンリチウム＋血漿分離剤(緑)	採取材料	血液	採取量	3 mL	
		遠心分離			遠心		
測定材料	血漿	測定必要量					

採取容器について

平日時間内はC5採血管, 時間外・休日および緊急検査はL3採血管を使用して下さい。

検体採取について

採取後検体の取扱い

室温保存

検体搬送について

全血での長時間放置は禁

採取検体の保存条件

	保存検体種	優先 保存条件	保存条件1		保存条件2		保存条件3	
			温度	安定性	温度	安定性	温度	安定性
01	血清	保存条件2	冷蔵	7 日	凍結	長期		
02	遠心後の臍帯血上	保存条件2	冷蔵	7 日	凍結	長期		

[0351/5C-070-001]

Ver.17

5.免疫学的検査 >> 5C.血漿蛋白>>5C070 CRP(C反応性蛋白)

CRP(C反応性蛋白)

C-reactive protein

連絡先 平日時間内：3487

時間外・休日：3479・PHS 2908

03	血漿（ヘパリンLi	保存条件2	冷蔵	7 日	凍結	長期		
----	-----------	-------	----	-----	----	----	--	--

受入不可基準

溶血	検体凝固	強乳び	採取量過不足	採取容器違い
			不可	不可
尿材料違い	冷蔵保存なし	遮光保存なし	開栓	黄疸

検査に要する時間(生理検査)

--

再検査・追加検査の対応可能日数

検体採取日から3日間
検体保存環境の都合上, 時間外・休日および緊急検査の検体は、検体到着後6時間以内とします

検体採取に関する注意事項・検査の実施に関する注意事項

検査機器	LAbOSPECT 008 α （日立ハイテク）
検査所要日数	当日報告
検査部門・委託先	
検査部門(平日時間内)	中央診療棟2階 中央検査室
検査部門(時間外・休日)	中央診療棟2階 時間外検査室

検査結果報告について

基準値設定材料・検査方法

基準値設定材料	血液
検査方法	ラテックス免疫比濁法 (LTIA)

生物学的基準範囲

	男性	女性	単位
00 CRP(C反応性蛋白)<a href=" ../medi	0.14 以下	0.14 以下	mg/dL

基準値情報

緊急異常値

[0351/5C-070-001]

Ver.17

5.免疫学の検査 >> 5C.血漿蛋白>>5C070 CRP(C反応性蛋白)

CRP(C反応性蛋白)

C-reactive protein

連絡先 平日時間内：3487

時間外・休日：3479・PHS 2908

電話連絡対応

臨床的意義

異常値を示す病態・疾患

参考文献

JLAC10

分析物	5C070	CRP(C反応性蛋白)
識別	0000	
材料	029	臍帯血
測定法	062	ラテックス凝集比濁法
分析物	5C070	CRP(C反応性蛋白)
識別	0000	
材料	023	血清
測定法	062	ラテックス凝集比濁法

変更履歴

Ver	文書更新日	変更適用日	内容
1	2008/04/01	2008/04/01～	制定
2	2012/02/01	2012/01/04～	検査機器変更
3	2016/04/25	2016/04/01～	平成28年度診療報酬改定
4	2017/04/21	2017/03/10～	最低採取量・容器変更([2mL]⇒[3mL])
5	2018/04/06	2018/04/01～	平成30年度診療報酬改定
6	2019/12/16	2019/12/16～	JLAC10更新に伴う検査項目名称変更
7	2020/04/02	2020/04/01～	令和2年度診療報酬改定

[0351/5C-070-001]

Ver.17

5.免疫学の検査 >> 5C.血漿蛋白>>5C070 CRP(C反応性蛋白)

CRP(C反応性蛋白)

C-reactive protein

連絡先 平日時間内：3487

時間外・休日：3479・PHS 2908

8	2022/03/01	2021/12/01～	項目コード統合(血液/臍帯血)
9	2022/03/09	2021/12/09～	採取名称部分に検体搬送先を印字
10	2022/03/19	2021/12/27～	採取容器変更
11	2022/03/29	2022/01/01～	JCCLS共用基準範囲を採用
12	2022/04/06	2021/06/25～	検査室名称を変更
13	2022/04/07	2022/01/04～	検査機器変更
14	2022/08/01	2022/04/01～	令和4年度診療報酬改定
15	2022/10/21	2022/03/28～	24時間測定可能項目として改訂, 項目コード統合 ([0351] ← [0351・9152])
16	2022/12/01	2022/12/01～	受入不可基準などについて全面改訂
17	2024/06/04	2024/06/01～	令和6年度診療報酬改定