

[1165/4F-065-001]

Ver.16

4.内分泌学的検査 >> 4F.性腺・胎盤ホルモンおよび結合蛋白>>4F065 テストステロン

テストステロン

testosterone

連絡先 3483

患者同意について

検査結果に影響を与える臨床情報

オーダーボタン名(検体)

1165

001

テストステロン

検査予約

16時30分以降翌日測定, 要連絡

至急オーダー

可


検査オーダーに関する注意事項

患者の検査前準備

検体採取のタイミング

ビオチンを投与・摂取している患者(5mg/日以上)の場合は, 投与後少なくとも8時間以上経過してから採血を実施してください。

ラベル見本(検体)(単項目オーダー時)

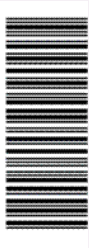キョウダイテスト	
注	80 外
☐	☐ 急
AIA.	
	
血液	*_*_*_*_*_-89001
中検	**_*_*_*_*_*
C6	6ml

ラベル見本(細菌)(単項目オーダー時)

採取容器・検査材料

[1165/4F-065-001]

Ver.16


4.内分泌学的検査 >> 4F.性腺・胎盤ホルモンおよび結合蛋白>>4F065 テストステロン

テストステロン

testosterone

連絡先 3483

01	C6	凝固促進剤＋血清分離剤(ピンク)	
採取材料	血液	採取量	6 mL
遠心分離		遠心	
測定材料	血清	測定必要量	

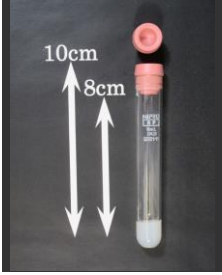

採取容器について

検体採取について

サンプル不良, 保存状態・搬送状態が不適切な検体は受入不可

採取後検体の取扱い

室温保存

検体搬送について

採取検体の保存条件

	保存検体種	優先 保存条件	保存条件1		保存条件2		保存条件3	
			温度	安定性	温度	安定性	温度	安定性
01	血清	保存条件2	冷蔵	7 日	凍結	60 日		

受入不可基準

溶血	検体凝固	強乳び	採取量過不足	採取容器違い
			不可	不可
尿材料違い	冷蔵保存なし	遮光保存なし	開栓	黄疸

検査に要する時間(生理検査)

再検査・追加検査の対応可能日数

検体採取日から5日間

検体採取に関する注意事項・検査の実施に関する注意事項

検査機器 AIA-CL2400 (東ソー)

[1165/4F-065-001]

Ver.16

4.内分泌学的検査 >> 4F.性腺・胎盤ホルモンおよび結合蛋白>>4F065 テストステロン

テストステロン

testosterone

連絡先 3483

変更履歴

Ver	文書更新日	変更適用日	内容
1	2008/04/01	2008/04/01～	制定
2	2011/06/23	2011/07/01～	基準値変更
3	2016/04/25	2016/04/01～	平成28年度診療報酬改定
4	2017/03/21	2017/02/23～	検体ラベル表記変更[R]⇒[]
5	2018/04/06	2018/04/01～	平成30年度診療報酬改定
6	2020/04/02	2020/04/01～	令和2年度診療報酬改定
7	2020/07/03	2020/07/03～	ビオチン大量服用患者の留意事項を追記
8	2020/10/22	2020/10/22～	ビオチン干渉項目に関する案内文を改訂
9	2022/03/09	2021/12/09～	採取名称部分に検体搬送先を印字
10	2022/03/19	2021/12/27～	採取容器変更
11	2022/03/31	2022/01/01～	検査方法・基準値変更
12	2022/04/06	2021/06/25～	検査室名称を変更
13	2022/04/07	2022/01/04～	検査機器変更
14	2022/08/01	2022/04/01～	令和4年度診療報酬改定
15	2022/12/01	2022/12/01～	受入不可基準などについて全面改訂
16	2024/06/04	2024/06/01～	令和6年度診療報酬改定