

[3867/4A-035-002]

Ver.9

4.内分泌学的検査 &gt;&gt; 4A.視床下部・下垂体ホルモン&gt;&gt;4A035 FSH(卵胞刺激ホルモン)

## FSH(卵胞刺激ホルモン)

follicle-stimulating hormone

連絡先 3483

患者同意について

検査結果に影響を与える臨床情報

オーダーボタン名(検体)

3867

001

FSH[他材料]

検査予約

16時30分以降翌日測定, 要連絡

至急オーダー

可


検査オーダーに関する注意事項

患者の検査前準備

検体採取のタイミング

ビオチンを投与・摂取している患者(5mg/日以上)の場合は, 投与後少なくとも8時間以上経過してから採血を実施してください。

ラベル見本(検体)(単項目オーダー時)
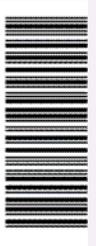
|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| キョウダイテスト  |                                       |
| 注   | 80 外                                  |
| <input type="checkbox"/>  | <input checked="" type="checkbox"/> 急 |
| AIA.  |                                       |
|  |                                       |
| その他   | *_*_*_*_*_-89032                      |
| <input type="checkbox"/> 中検   | **_*_*_*_*_*_*_*_*                    |
| U   | <input type="checkbox"/> 3ml          |

ラベル見本(細菌)(単項目オーダー時)

採取容器・検査材料

[3867/4A-035-002]

Ver.9


4.内分泌学的検査 &gt;&gt; 4A.視床下部・下垂体ホルモン&gt;&gt;4A035 FSH(卵胞刺激ホルモン)

## FSH(卵胞刺激ホルモン)

follicle-stimulating hormone

連絡先 3483

|      |       |           |      |
|------|-------|-----------|------|
| 01   | U     | 丸底プレイン(白) |      |
| 採取材料 | その他材料 | 採取量       | 3 mL |
| 遠心分離 |       | 遠心        |      |
| 測定材料 | 検体上清  | 測定必要量     |      |

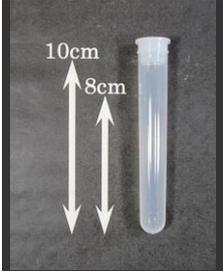

採取容器について

検体採取について

サンプル不良, 保存状態・搬送状態が不適切な検体は受入不可

採取後検体の取扱い

室温保存

検体搬送について

採取検体の保存条件

|    | 保存検体種    | 優先<br>保存条件 | 保存条件1 |     | 保存条件2 |     | 保存条件3 |     |
|----|----------|------------|-------|-----|-------|-----|-------|-----|
|    |          |            | 温度    | 安定性 | 温度    | 安定性 | 温度    | 安定性 |
| 01 | 遠心後の検体上清 | 保存条件2      | 冷蔵    |     | 凍結    |     |       |     |

受入不可基準

| 溶血    | 検体凝固   | 強乳び    | 採取量過不足 | 採取容器違い |
|-------|--------|--------|--------|--------|
|       |        |        | 不可     | 不可     |
| 尿材料違い | 冷蔵保存なし | 遮光保存なし | 開栓     | 黄疸     |
|       |        |        |        |        |

検査に要する時間(生理検査)

再検査・追加検査の対応可能日数

検体採取日から5日間

検体採取に関する注意事項・検査の実施に関する注意事項

検査機器 AIA-CL2400 (東ソー)



[3867/4A-035-002]

Ver.9

4.内分泌学的検査 &gt;&gt; 4A.視床下部・下垂体ホルモン&gt;&gt;4A035 FSH(卵胞刺激ホルモン)

## FSH(卵胞刺激ホルモン)

follicle-stimulating hormone

連絡先 3483

## 変更履歴

| Ver | 文書更新日      | 変更適用日       | 内容               |
|-----|------------|-------------|------------------|
| 1   | 2022/03/01 | 2020/12/18～ | 新規作成, KINGオーダー開始 |
| 2   | 2022/03/03 | 2021/12/10～ | 採取容器変更           |
| 3   | 2022/03/09 | 2021/12/09～ | 採取名称部分に検体搬送先を印字  |
| 4   | 2022/04/01 | 2022/01/01～ | 検査方法変更           |
| 5   | 2022/04/06 | 2021/06/25～ | 検査室名称を変更         |
| 6   | 2022/04/07 | 2022/01/04～ | 検査機器変更           |
| 7   | 2022/08/01 | 2022/04/01～ | 令和4年度診療報酬改定      |
| 8   | 2022/12/01 | 2022/12/01～ | 受入不可基準などについて全面改訂 |
| 9   | 2024/06/04 | 2024/06/01～ | 令和6年度診療報酬改定      |